Laborpraktikum Teilchenphysik Paulsche Teilchenfalle

Knut Kiesel Tobias Pook

2. September 2012

Inhaltsverzeichnis

1	Ziel der Messung					
2	2 Aufbau und Durchführung					
3	3.1 Bahnbeschreibung	4 5 6				
4	3.4 Stabilitätsdiagramm	8				
5	Fazit	R				

1 Ziel der Messung

Ziel des Versuches ist die Speicherung von elektrisch geladenen Teilchen und die Bestimmung des Verhältnisses von Ladung zu Masse. Um die Teilchen in einem räumlich begrenzten Feld zu halten, ist ein statisches elektrisches Feld nicht ausreichend, da man damit keine Potentialminima schaffen kann. Eine Möglichkeit dennoch Teilchen zu fangen ist das Anlegen von phasenverschobenen Wechselspannungen und Gleichspannungen, wobei bei richtiger Einstellungen der Spannungen und Frequenzen die Teilchen stabil in der Falle bleiben. Konkret wurden beim durchgeführten Experiment der meta-stabile Bereich eines rotierenden Sattelpotential genutzt um Teilchen zu speichern. Für jede räumliche Komponente $i \in \{x,y,z\}$ lautet die Bewegungsgleichung

$$\frac{4}{m\Omega^2}|\vec{F_i}| + (a_i - 2q_i\cos(2\xi_i))i + 2k_L\frac{dx}{d\xi_i} + \frac{d^2x}{d\xi_i^2} = B\cos\left(\frac{2\omega_W}{\Omega}\xi_i\right)$$
(1)

mit dem gleichstromabhängigen Koeffizienten $a_i=\frac{16KqU_{G,i}}{3\Omega^2mr_0^2}$, dem wechselstromabhängigen Koeffizienten $q_i=-\frac{4kqU_i}{\Omega^2mr_0^2}$, dem Antribskoeffienzenten $B=\frac{2qU_W}{r_0m\Omega^2}$, dem Luftreibungskoeffizient $k_L=\frac{6\pi\eta R}{m\Omega}$, der Winkelfrequenz der Dreiphasenspannung Ω , der Winkelfrequenz der zusätzlich an einem Plattenpaar angelegten Wechselspannung ω_W und der normalisierten Zeit $\xi=\frac{\Omega t}{2}$. \vec{F} ist eine konstante äußere Kraft, zum Beispiel bei der z-Komponente die Gewichtskraft. Die Grundschwingung der Lösung wird durch

$$\beta_i = \sqrt{a_i + \frac{q_i^2}{2}}$$

beschrieben. Durch Anlegen geeigneter Frequenzen und Spannungen und das Beobachten der entstehenden Teilchenbewegungen kann mit unterschiedlichen Methoden das Verhältnis von Ladung zur Masse bestimmt werden.

2 Aufbau und Durchführung

Die z-Achse verläuft vertikal, die y-Achse ist die Blickrichtung, und die x-Achse liegt senkrecht zu den beiden übrigen.

Die Falle wird aus sechs Kupferringen und 12 Verbindungsstücken zu einem Würfel geklebt. Nach dem Anlöten und Isolieren der Anschlusskabel wird die Falle mit schwarzem Lack angestrichen, um Steulicht in der Kammer zu verringern. Die Falle wird mittig über der Öffnung für die Spritze an den Anschlusskabeln befestigt und die Plattform von unten an die Spannungsversorgung angeschlossen (siehe Abbildung 1), welche je nach Hebelstellung die Gleichspannungen oder die zusätzliche Wechselspannung zur Dreiphasenspannung hinzufügt. Die Dreiphasenspannung, im folgenden auch Fokussierspannung genannt, wird aus drei Wechselpannungsquellen die mit einem konstanten Phasenunterschied von 120° betrieben werden, geliefert (siehe Abbildung 2). Die Amplitude kann dabei für jedes Flächenpaar individuell eingestellt werden.

Es gibt mehrere Möglichkeiten die Gleichspannung anzulegen: Man kann sie auf den beiden gegenüber liegenden Seiten (siehe Abbildung 4) oder zwischen zwei gegenüberliegenden Seiten (siehe Abbildung 3) anbringen. Die Wechselspannung wird zwischen zwei gegenüberliegenden



Abbildung 1: Versuchsaufbau der Paulschen Teilchenfalle

Flächen angelegt (siehe Abbildung 5), Frequenz und Amplitude sind einzeln regelbar. Die Verschaltung ist jedoch schon vorgefertigt und kann mit Schaltern hinzugeschaltet werden.

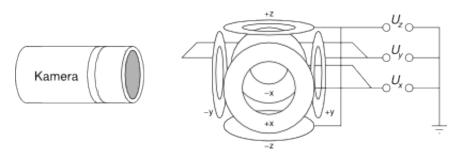


Abbildung 2: Verschaltung im Generator für die Fokussierspannung

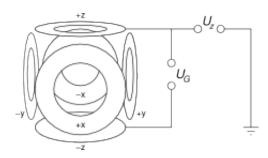


Abbildung 3: Verschaltung im Generator für die Gleichspannung zwischen zwei Flächen

Aus Sicherheitsgründen wird die Falle durch eine durchsichtige Acrylhaube abgedeckt. Die Haube wurde zusätzlich mit Ausnahme von zwei Stellen mit schwarzem Klebeband verkleidet. Die zwei Öffnungen dienen der seitlichen Beobachtung der Falle und der Bestrahlung durch eine oben angebrachten Lampe. Die geladen Teilchen sind Aluminiumpulverstücke, die mittels einer Spritze durch eine Öffnung unterhalb der Falle eingebracht werden. Durch das Reiben an der Spritzenöffnung werden die Aluminiumteile ionisiert. Da zwischen Öffnung und dem stabilen Bereich der Teilchenfalle ein Abstand von ca. $2.5\,\mathrm{cm}$ besteht wurden die Teilchen durch anschnipsen der Spritze in die Falle geschleudert.

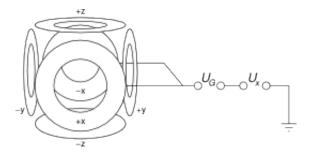


Abbildung 4: Verschaltung im Generator für eine Gleichspannung auf zwei Flächen

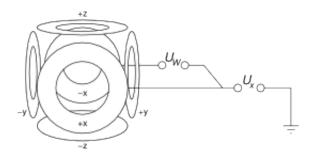


Abbildung 5: Verschaltung im Generator für die Wechselspannung zwischen zwei Flächen

3 Ergebnisse

Mit einem Messschieber wird der Plattenabstand der Teilchenfalle auf $d=(3.05\pm0.02)\,\mathrm{cm}$ abgeschätzt.

3.1 Bahnbeschreibung

In den meisten Fällen beschreiben die eingefangenen Teilchen eine elliptische Teilchenbahn deren Radius und die Exzentrizität durch das Verhältnis der angelegten Potenziale in der Fokusierspannung erklärt werden können. Viele Teilchen beschreiben zudem sehr kleine Bahnen und sind deshalb nur noch als Punkte wahrzunehmen.

Manchmal bilden sich auch Lissajou Figuren. Lissajous Figuren entstehen bei der Überlagerung harmonischer Schwingungen, wenn das Verhältnis der Frequenzen rational ist. In diesem Fall bildet die Teilchenbahn eine geschlossene Figur. Die möglichen Formen der Figuren sind sehr vielfältig und hängen vom Frequenzverhältnis und dem Phasenunterschied der Schwingungen ab. Ein Beispiel ist in Bild 6 zu sehen.

Wenn man mehrere Teilchen in der Teilchenfalle gefangen hat, kann man manchmal pseudo Kristallstrukturen erkennen: Die Teilchen stoßen sich gegenseitig ab und suchen energetisch günstige Zustände, ebenso wie in einem Kristall. Maximal wurden vier Teilchen auf einmal eingefangen, die alle ähnliche Abstände zueinander hatten, leider sind das noch zu wenige, um eine definitive Aussage über die genaue Kristallstruktur zu machen.



Abbildung 6: Beispiel für das auftreten einer Lissajous Figur

3.2 Kompensation der Gewichtskraft

In Gleichung (1) wird der Einfluss der Luftreibung vernachlässigt und ein Näherungsansatz der Form $z(\xi_z)=Z(\xi_z)+d(\xi_z)$ durchgeführt. Die z-Komponente wird nun durch

$$Z(\xi) = Z_0 \sin(\beta_z \xi) - \frac{4|\vec{F_z}|}{m\beta_z \Omega^2}$$

beschrieben. Man sieht, dass die Schwingung um einen konstanten Term verschoben ist, der von a_z und q_z abhängt. Diese Abhängigkeit besteht nicht mehr, wenn gilt:

$$|\vec{F}_z| = |\vec{F}_G + \vec{F}_{qE}| = mg + q\frac{U_G}{d} = 0$$
 (2)

Zu der Dreiphasenspannung wird nun ein zusätzlicher Potentialunterschied zwischen den beiden z-Komponenten angeschlossen (siehe Bild \ref{Bild}), der solange erhöht wird, bis die Gravitationskraft kompensiert wird. Dies kann dadurch überprüft werden, dass sich der Mittelpunkt der Teilchenschwingung bei Änderung der Amplitude der z-Komponente der Dreiphasenspannung nicht mehr ändert. Die Fokussierspannung wird bei $U_i = (1000 \pm 50)\,\mathrm{V}$ für alle Flächenpaare betrieben.

Weil die Gleichspannung stark schwankend ist, wird die effektive Spannung durch notieren der angezeigten Werte in einem Zeitraum von ungefähr $20\,\mathrm{s}$ und anschliessendem Mitteln bestimmt. Da man die Teilchen oft wegen spontaner Spannugsschwankungen der Quelle verliert, kann der Bereich, in dem die Gravitationskraft kompensiert wird, nicht in feineren Spannungsabschnitten untersucht werden. Da so nicht abzuschätzen ist wie exakt der Wert für die Kompensationsspannung U_G getroffen wird, wird als Fehler die mittlere Differenz zu den nächstliegenden U_G gewählt, bei dem wieder Bewegungen des Schwingungsmittelpunkt bei Variation der Fokussierspannung U_z zu beobachten sind. Die Messung wurde für mehrere gleichzeitig gefangene Teilchen durchgeführt und die Spannung erhöht bis alle Teilchen den Stabilitätsbereich verlassen haben. Das Vorzeichen der Ladung ergibt sich aus dem Anschluss an die Spannungsquelle und ist für alle beobachteten Teilchen negativ, was mit der Theorie übereinstimmt.

Aus Gleichung 2 lässt sich direkt eine Formel für die spezifische Ladung des untersuchten Teilchen herleiten:

$$\frac{q}{m} = -\frac{g \cdot d}{U_G} \tag{3}$$

wobei $g=9.81\,\mathrm{m/s^2}$ die Erdbeschleunigung ist und als fehlerfrei angenommen wird. Die errechneten Werte können Tabelle 2 entnommen werden.

$U_G[V]$	$\sigma_{U_G}[V]$	Verhalten des Bahnmittelpunkts bei Änderung von ${\cal U}_z$		
45	5	Bewegung	Bewegung	
92	8	still	Bewegung	
168	4	Bewegung	Bewegung	
228	3	Bewegung	Bewegung	
273	5	verloren	still	

Tabelle 1: Verhalten von beiden Teilchen bei unterschiedlichen Gleichspannungen zur Bestimmung der z-Kompensation

Teilchen	$U_{G,komp}[V]$	$\frac{q}{m} \left[\frac{mC}{kg} \right]$
1	92 ± 8	0.33 ± 0.04
2	273 ± 5	0.109 ± 0.009

Tabelle 2: Das Verhältnis von Ladung zu Masse von verschiedenen Teichen, bestimmt durch die Kompensation der Gewichtskraft

3.3 Resonanz

In diesem Versuchsteil wurde zusätzlich zur Fokusierspannung eine Wechselspannung zwischen dem Flächenpaar entlang der x-Achse angelegt. Die Gleichspannung wird auf 0 geregelt.

Bei einer Frequenz von

$$\omega_W^{res} = \frac{\Omega}{2} \sqrt{\beta_x^2 - 2k_L^2} \tag{4}$$

tritt eine resonante Verstärkung der Oszillation auf und die Teilchenbahn erreicht ihre maximale Auslenkung

$$A_{max} = \frac{B}{2k_L \sqrt{\beta_x^2 - k_L^2}}. (5)$$

Durch Eliminieren von k_L in Gleichung 4 und 5 erhält man

$$\frac{q}{m} = \pm \sqrt{\frac{U_w^2 r^6 \Omega^4 \pm r^4 \Omega^2 \sqrt{(U_w r \Omega)^4 - 4(4KU_x A_{max} \omega)^4}}{128A_{max}^2 (KU_x)^4}}.$$
 (6)

Für die Lösung im Vakuum reicht es in Gleichung (4) $k_L=0$ zu setzen, und man erhält

$$\frac{q}{m} = -\frac{\Omega r_0^2 \omega_W^{res}}{\sqrt{2} K U_x}. (7)$$

Um die Resonanzfrequenz zu messen, wird die Wechselspannung variiert bis das Teilchen maximale Auslenkung zeigt. In Luft wird zusätzlich die maximale Amplitude bestimmt, indem mit einer Digitalkamera Fotos der Teilchenbahn angefertigt werden. Es wird vor Durchführung des Versuchs die Falle entfernt und eine Längenskala auf Höhe der Fallenmitte senkrecht zur Kamerablickrichtung platziert und ein Vergleichsbild aufgenommen. Da sowohl die Kameraposition, Kameraeinstellungen als auch die Teilchenfalle nicht mehr bewegt werden, kann aus diesen Bildern ein Zusammenhang zwischen Pixeln pro cm in der Beobachtungsebene bestimmt werden.

3.3.1 Messung in Luft

Wenn man die Ladung zu Masse Verhältnisse in Luft mit Gleichung (6) ausrechnet, erhält man zwei Lösungen, von der man diejenige negative nimmt, die näher am genäherten Wert von Gleichung (7) liegt. Der Fehler beider Lösungen ist fast immer in der gleichen Größenordnung wie der Wert. Dies liegt daran, dass die Formel Differenzen von hohen Potenzen beinhaltet, was einen großen relativen Fehler ergibt.

Wenn man stattdessen die Näherung für Vakuum verwendet, erscheinen die Fehler auf den ersten Blick sinnvoller, enthalten aber keine Information über die Luft.

3.4 Stabilitätsdiagramm

Wie Gleichung (1) zu entnehmen, ist die Grundschwingung der Teilchen gegeben durch β . Wenn β imaginär ist ($\Leftrightarrow a+\frac{1}{2}q^2>0$), werden die Winkelfunktionen zu Expotentialfunktionen, was zum Austritt der Teilchen aus der Falle führt. Dafür wird bei verschiedenen, konstanten $U_x=U_y=U_z$ die Spannung U_G gesucht, bei der das Teilchen entkommt. Weil das Teilchen nicht entkommen darf (es muss bei mehreren U_i vermessen werden), ist die Abschätzung nur schwer zu bewerkstelligen, da die Gleichspannungsquelle stark schwankt und es somit leicht entkommen kann. Für jedes Teilchen wird U_g gegen U_i^2 aufgetragen und eine lineare Regression durchgeführt. Die systematischen Fehler für das grobe Abschätzen der Gleichspannung resultieren sich in einer Verschiebung der Geraden nach unten, sodass die Steigung nicht stark beeinflusst wird. Aus der Steigung kann man dann die Werte für $\frac{q}{m}$ bestimmen. Am χ^2/ndf sieht man, dass die Spannungen tendenziell zu vorsichtig abgeschätzt wurden

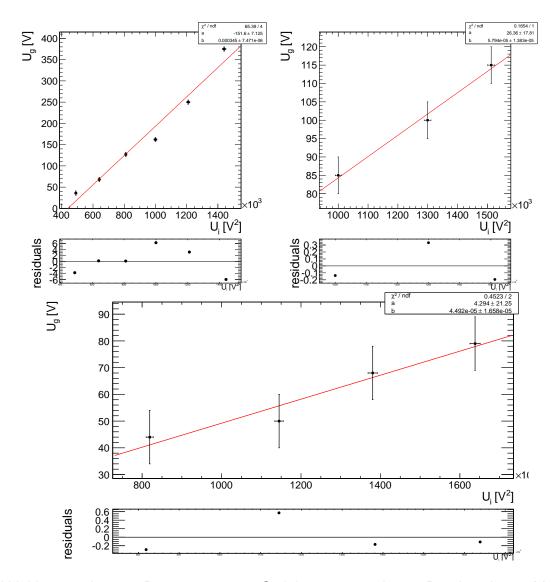


Abbildung 7: Lineare Regressionen zur Stabilitätsuntersuchung. Bei der oberen Messung ist der letzte Punkt nicht für den Fit verwendet worden, da bei dieser Spannug das Teilchen entkommen ist. Stattdessen kann man die Spannungsdifferenz zwischen eigentlichen Fluchtspannung und abgeschätzten Spannung ablesen.

4 Vergleich der Messungen

5 Fazit

Die Versuchsdurchführung war dadurch geprägt das die Spannungsquelle nur stark schwankende Ausgangsspannungen geliefert hat. Besonders ein reglemäßiges plötliches Abfallen der Fokussierspannung für ein Flächenpaar hat zu regelmäßigem Verlust der Teilchen geführt. Insbesondere die Resonanzmessung und die Stabiliätsmessung waren oft nicht durchzuführen, weil ein langfristiges einfangen der Teilchen nicht möglich war.